


Установка «МДЛП ТСД» с локальным обменом


Последние изменения: 2024-03-26

Для установки «МДЛП ТСД», необходимо скачать специальный мастер установки, который поможет шаг за шагом установить все компоненты программы, необходимые для работы.


После запуска откроется окно установщика.

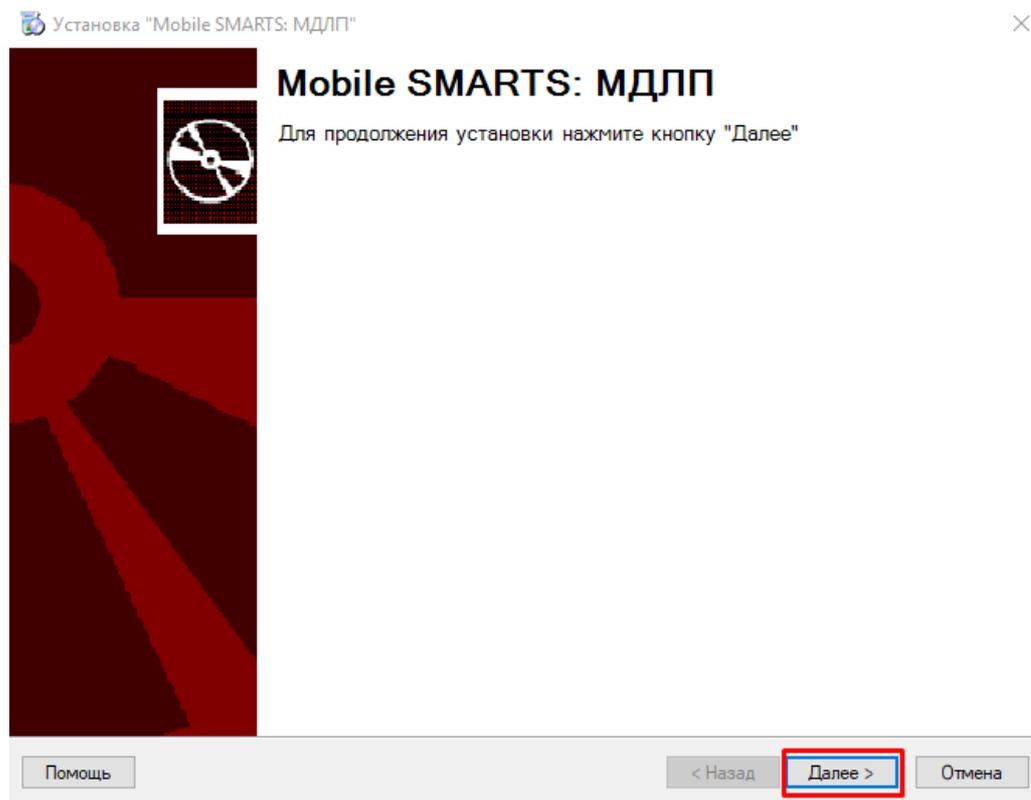

Принимаем условия лицензионного соглашения.

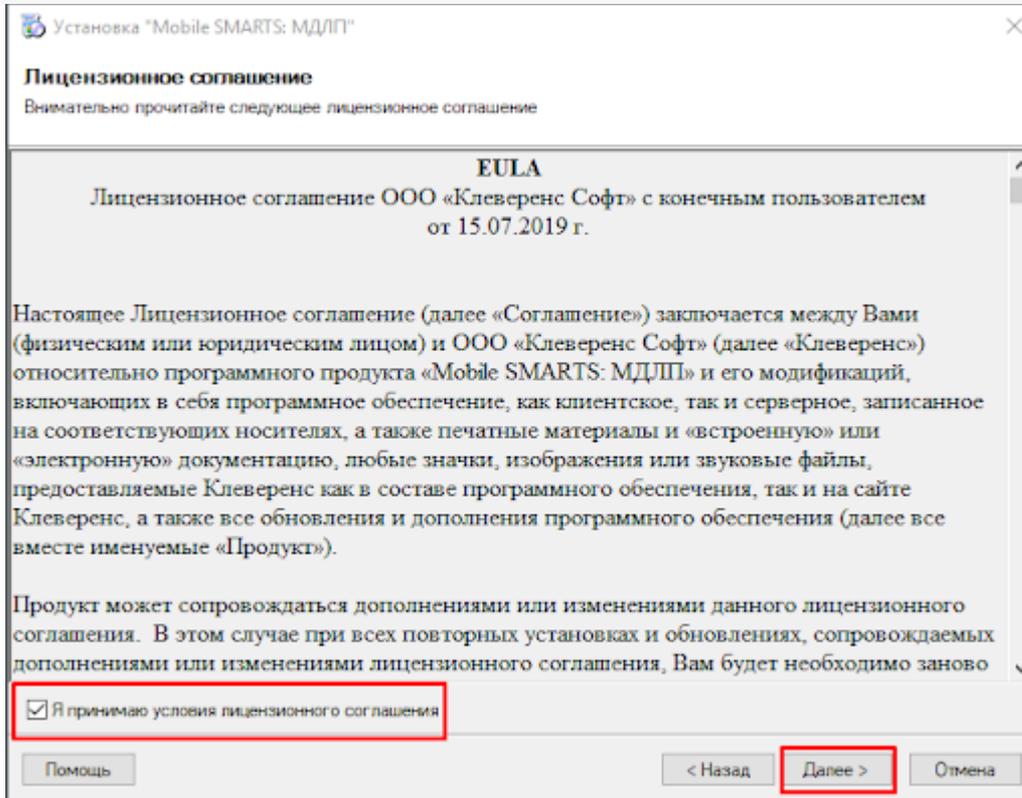

Далее необходимо выбрать тип учетной системы, с которой будет интегрирован продукт для обмена данными с мобильным устройством (терминалом сбора данных). Рассмотрим на примере «1С: Предприятие».

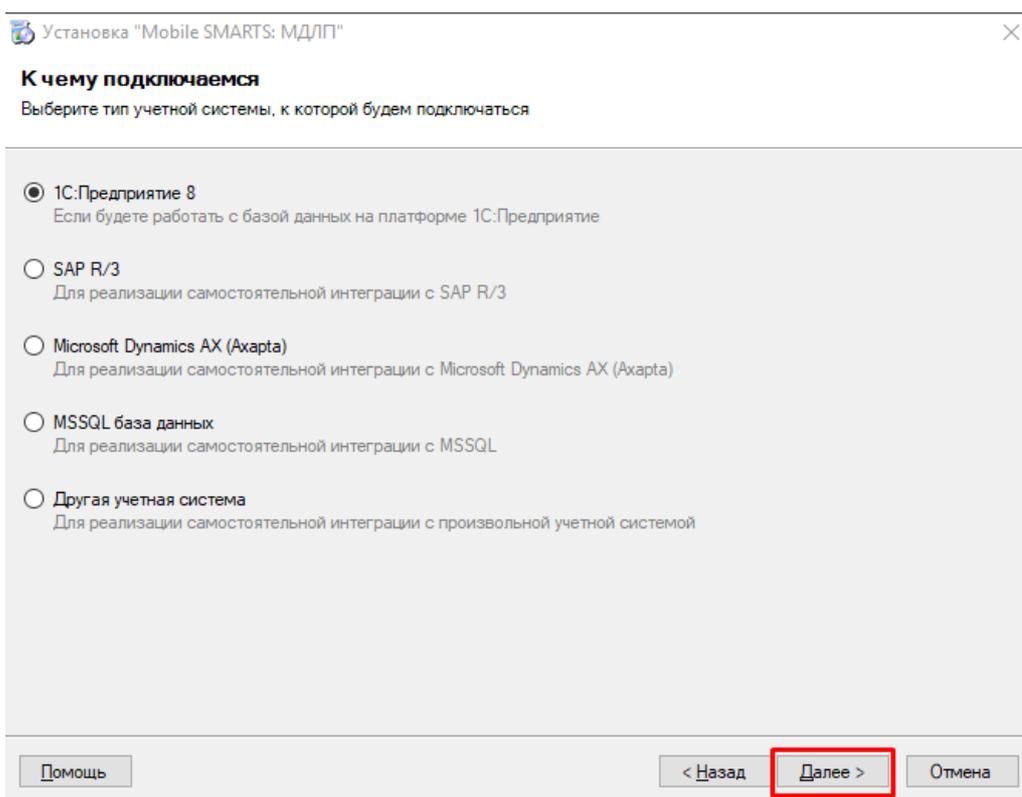

Выберите конфигурацию 1С.



Выбор способа обмена

Выберите вариант работы с мобильными устройствами

Через кабель (локально)

Для загрузки и выгрузки данных мобильное устройство подключается USB кабелем к компьютеру. Этот режим самый простой, но и ограничен по функционалу, так как не позволяет получать товары и документы онлайн и распределять задания между разными пользователями.

Беспроводной

Для загрузки и выгрузки данных мобильное устройство подключается к серверу Mobile SMARTS по Wi-Fi или через сотовую сеть.

Выгрузка и загрузка данных из учетной системы осуществляется оператором или регламентным заданием.

Помощь

< Назад

Далее >

Отмена

На этом установка продукта будет завершена. Нажмите кнопку «ОК».



Установка завершена



Далее будет создана база МДЛП для ТСД.

Для продолжения нажмите кнопку ОК.

[Документация по продукту на сайте](#)

[Техническая поддержка по продукту](#)

Помощь

< Назад

Далее >

ОК

Далее откроется окно мастера настройки, с помощью которого производится первичная настройка созданной базы. Для этого нажмите кнопку «Начать».

Начало



Этот мастер поможет вам пошагово выполнить настройку установленной вами программы.

Настройка необходима для корректной работы.

Внимательно относитесь к тому, что вы указываете на каждом экране.

Чтобы приступить к настройке нажмите "Начать" внизу окна.

Помощь

Начать

Прервать

Т.к. в качестве учетной системы была выбрана «1С: Предприятие», далее произойдет настройка подключения к базе 1С. С помощью кнопки «Выбрать» откройте окно со списком доступных баз 1С, и выберите ту, с которой будете работать (и которую указали ранее).

Настройка подключения 1С



Необходимо настроить подключение Вашей базы 1С к базе Mobile SMARTS, чтобы обработки загрузки/выгрузки данных знали, как и куда загружать и выгружать справочники и документы!

Если у Вас версия платформы 1С 8.3.9.2033 и выше, то могут возникнуть трудности с использованием обработок, [подробнее...](#)



Конфигурация 1С: 1С: Медицина 2.1, Больничная аптека

База данных 1С: **База 1С для работы пока не выбрана**

Выбрать...


Помощь

Назад


Далее

Прервать


После того как база 1С выбрана, нажмите кнопку «Далее».

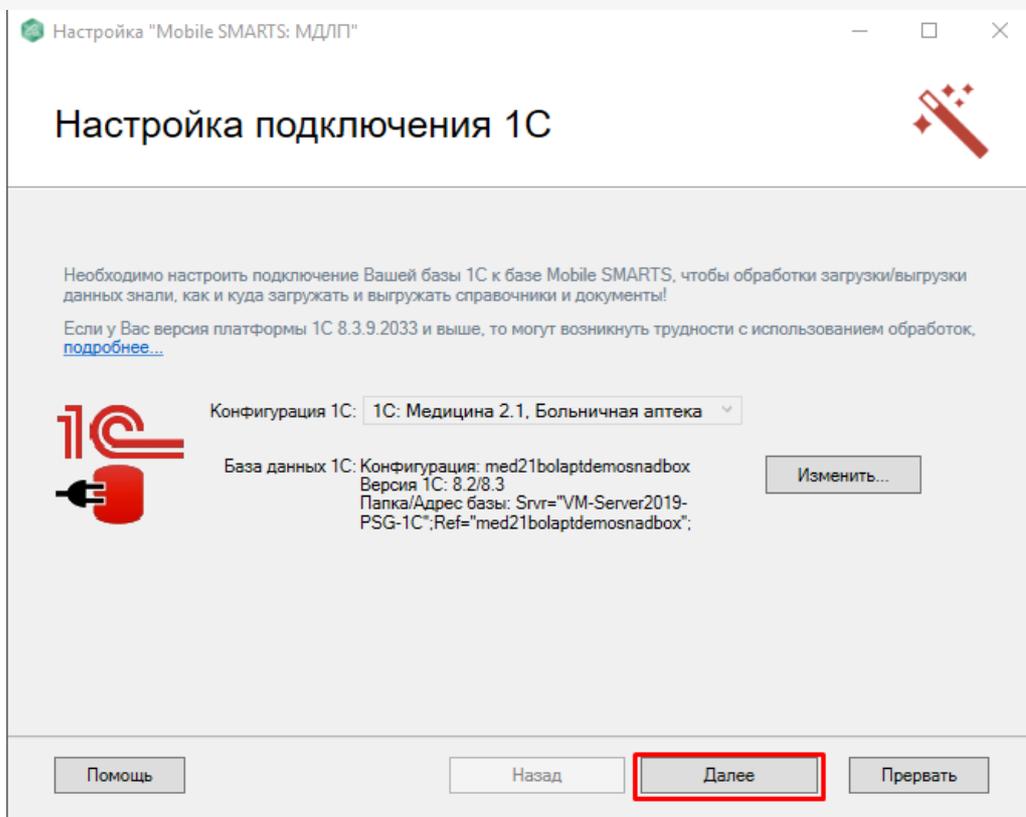


Далее можно установить клиентское приложение на ваше мобильное устройство.

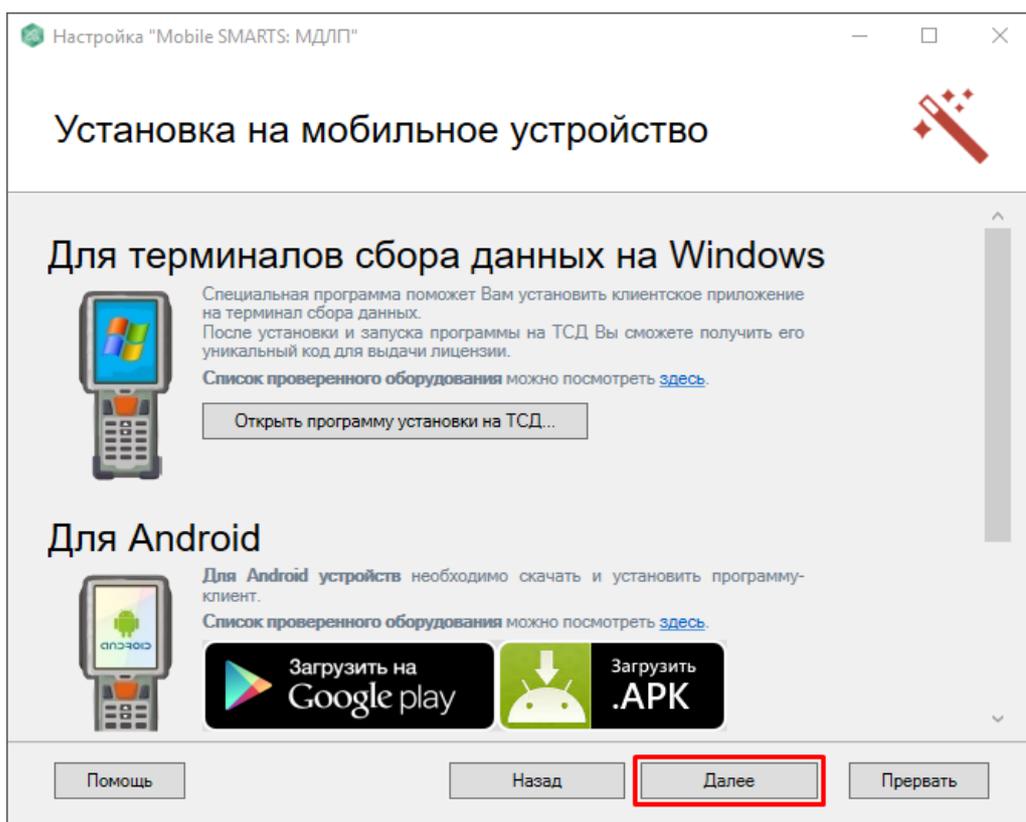

В следующем окне можно получить лицензию на мобильное устройство с помощью [менеджера лицензий](#).

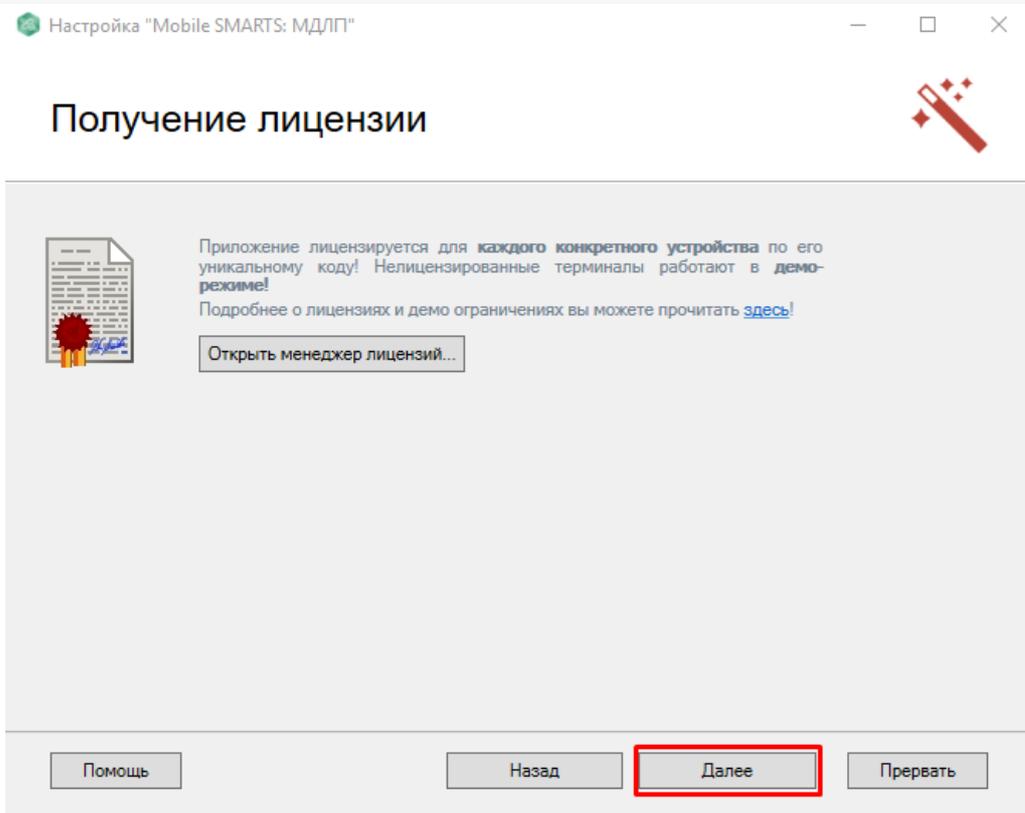

Начальная настройка созданной базы завершена!

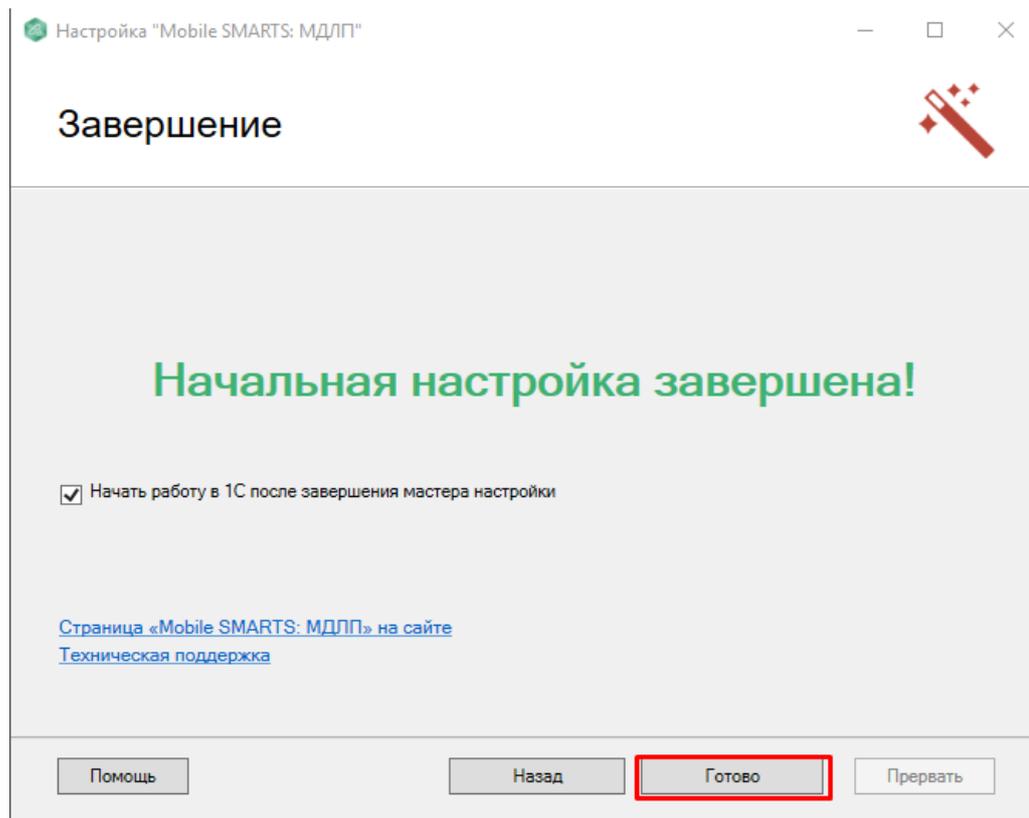

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку