


# Операция «Пересчет» по факту

Последние изменения: 2024-03-26


Перед началом работы необходимо выгрузить из учетной системы (например, 1С) на мобильное устройство справочник номенклатуры (его наличие можно проверить с помощью кнопки «Номенклатура» в главном меню приложения). В случае, если номенклатура не выгружена, или ЛП нет в справочнике, вместо названий препаратов отображается «Нет данных о ЛП».

1. В главном меню приложения выберите пункт «Пересчёт» и создайте новый документ (с помощью кнопки «Добавить»), куда будет записываться информация о сканируемом товаре.

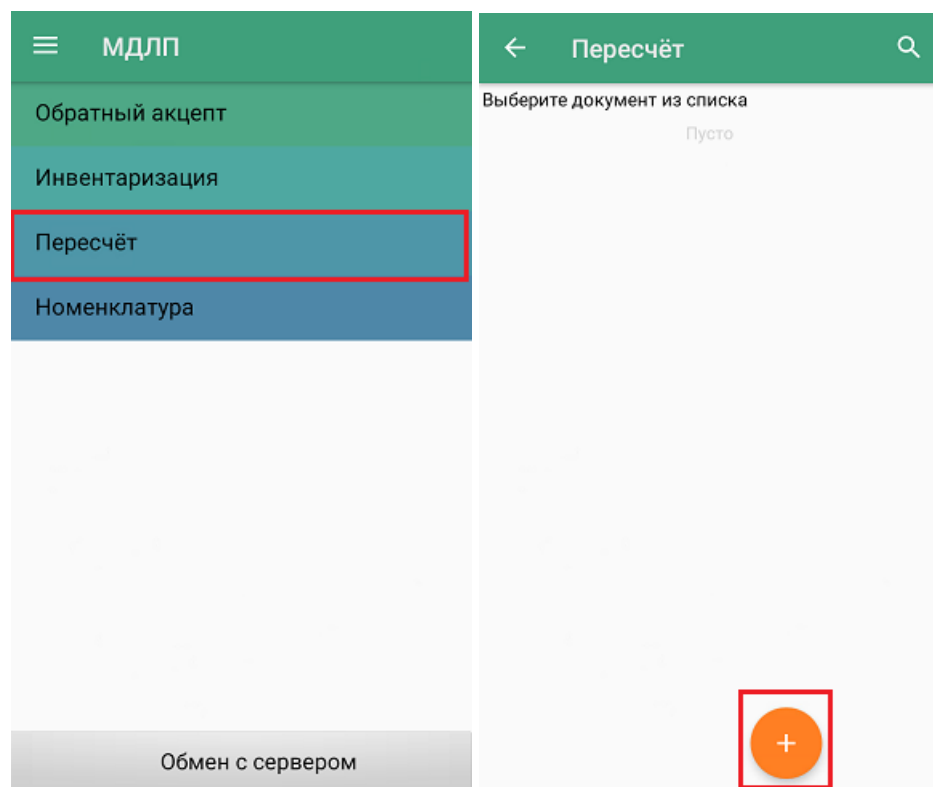


2. Для документа по умолчанию уже установлены определенные настройки операции, которые можно изменить в соответствии со своими требованиями.

Изменить настройки в текущем документе можно только до первого сканирования!

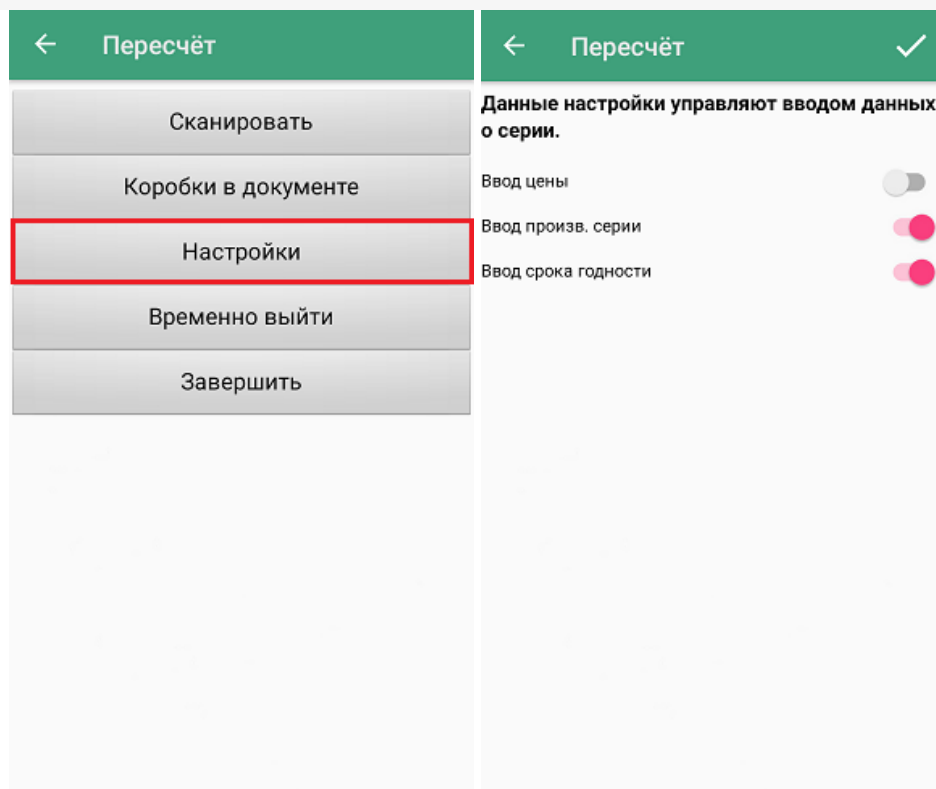

Все параметры в данном окне могут использоваться для учета в 1С.

3. Для того чтобы перейти к сканированию товара, нажмите кнопку «Сканировать».

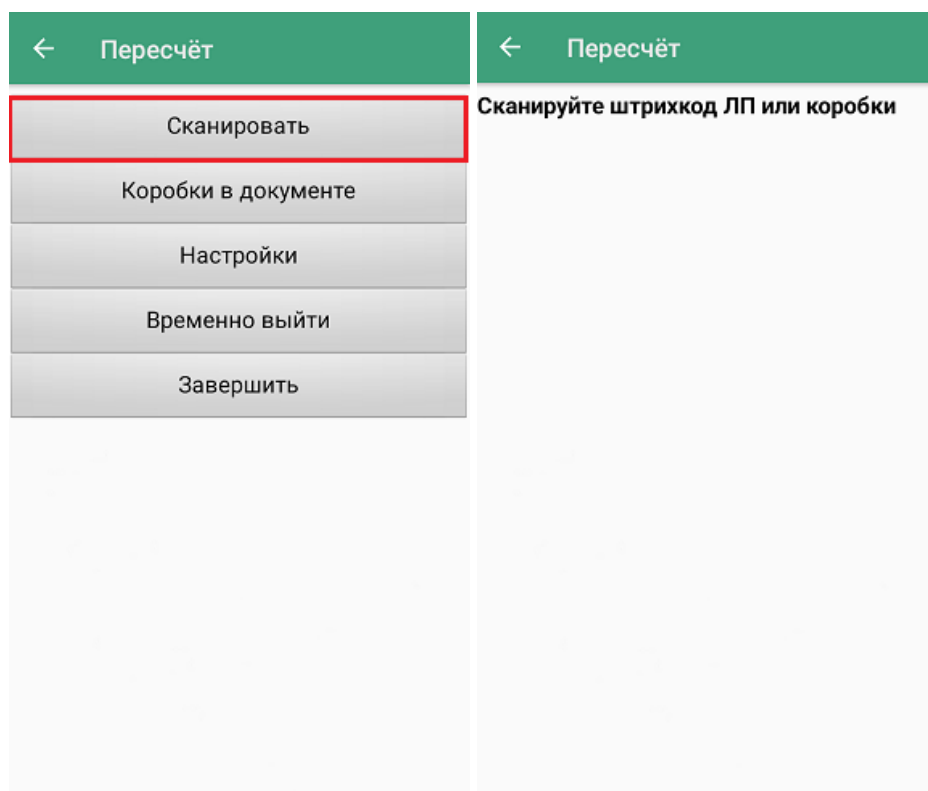

4. После сканирования ШК лекарственного препарата, потребуется указать данные, ввод которых вы настроили ранее.

← Пересчёт ✓	← Пересчёт ✓
<b>GTIN 02000000000091</b>	<b>GTIN 02000000000091</b>
Луналдин (табл. подъязычн.) [10 пач. картон., 10 ]	Луналдин (табл. подъязычн.) [10 пач. картон., 10 ]
Срок годности	Срок годности
ДД/ММ/ГГГГ	31/01/2020
Производственная серия	Производственная серия
	1233
Цена с НДС (₽)	Цена с НДС (₽)
	258
Ставка НДС	Ставка НДС
Без НДС ▼	Без НДС ▼
Выбор из списка	Выбор из списка

Вместо ввода вручную, серию товара можно выбрать из списка (если на устройство был выгружен справочник серий) с помощью одноименной кнопки.

← Пересчёт ✓	← Пересчёт ✓
<b>GTIN 02000000000091</b>	<b>GTIN 02000000000091</b>
Луналдин (табл. подъязычн.) [10 пач. картон., 10 ]	Луналдин (табл. подъязычн.) [10 пач. картон., 10 ]
Срок годности	Срок годности
ДД/ММ/ГГГГ	Серия: 300110 до 01.01.2020
Производственная серия	Серия: 444000 до 01.01.2019
Цена с НДС (₽)	Серия: 500020 до 01.01.2018
Ставка НДС	
Без НДС ▼	
Выбор из списка	Ручной ввод

5. После того как нужные данные указаны, можно ввести количество препарата.

← МДЛП ✓

**GTIN 02000000000091**  
 Луналдин (табл. подязычн.) [10 пач. картон., 10 ]  
 Было: 0 шт  
 Будет: 1 шт  

1

уп. контурн. яч., 10 шт

Введите количество

← Пересчёт

Сканируйте дальше

Наименование	шт
Луналдин (табл. подязычн.) [10 пач. картон., 10 ] GTIN 02000000000091	1 НДС: 0%

ЛП: 1 шт Коробок: 0 кор.

Если в настройках был отключен ввод всех доступных параметров (цена, серия, срок годности), то после сканирования ШК товара сразу появится окно ввода количества. После того, как нужное количество указано, можно сканировать следующий препарат, не выходя из этого окна.

6. В процессе пересчёта можно сканировать лекарственные препараты, находящиеся в коробках. Для этого отсканируйте ШК коробки, и на экране появится информация о ней (проверялась ли ранее, количество ЛП внутри ее). Если коробка отображается как пустая — начните сканировать ШК всех ЛП, находящихся в ней. Если коробка отображается как ранее проверенная, её можно открыть и продолжить пересчёт. В обоих случаях для того чтобы перейти к сканированию ЛП, нажмите кнопку «Проверить содержимое».

← Пересчёт ⋮

Коробка  
(00)091705252029613370

Ещё не проверялась  
Внутри: 0 шт

Проверить содержимое

7. После этого можно начинать сканирование ШК препаратов внутри данной коробки. Для каждого отсканированного ЛП можно указать данные (в зависимости от настроек), и количество.

← Пересчёт

Сканируйте ЛП в коробке  
(00)091705252029613370

Наименование	шт
Пусто	

← Пересчёт

Сканируйте ЛП в коробке  
(00)091705252029613370

Анальгин (р-р для в/в и в/м введ.) [10 пач. картон., 10] GTIN 04602824001506	1 НДС: 0%
Анальгин (р-р для в/в и в/м введ.) [10 пач. картон., 10] GTIN 04602824001506	2 НДС: 0%

ЛП: 0 шт

ЛП: 3 шт

8. Для того чтобы закрыть коробку, нажмите кнопку «Назад». Надпись в верхней части экрана изменится на «Сканируйте дальше», и появится общий список товаров в коробках и без. После этого можно сканировать штрихкоды препаратов в коробках и вне их.


← Пересчёт

Сканируйте дальше


Луналдин (табл. подъязычн.) [10 пач. картон., 10] GTIN 02000000000091	1 НДС: 0%
Анальгин (р-р для в/в и в/м введ.) [10 пач. картон., 10] GTIN 04602824001506	1 НДС: 0%
Анальгин (р-р для в/в и в/м введ.) [10 пач. картон., 10] GTIN 04602824001506	2 НДС: 0%

ЛП: 4 шт Коробок: 1 кор.

9. В меню операции «Пересчёт» можно просмотреть список коробок, их [SSCC](#), а также количество препаратов в них.

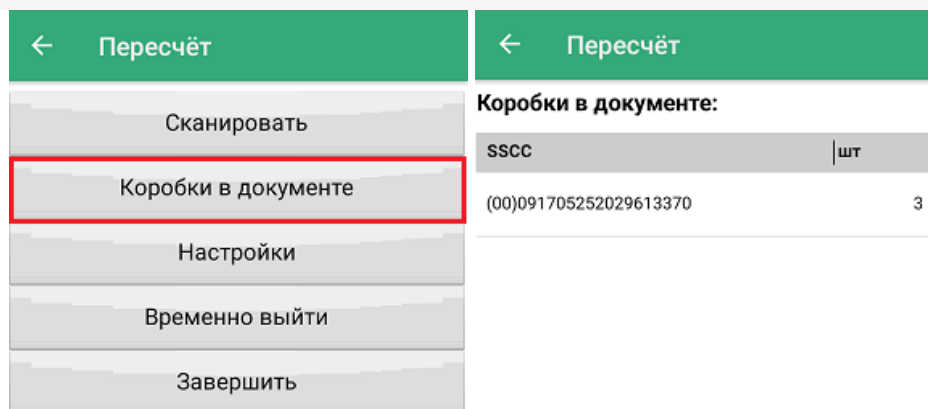

10. После того, как документ собран, необходимо завершить его с помощью кнопки «Завершить». Это делается для того чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#). Незавершенный документ отправить нельзя.

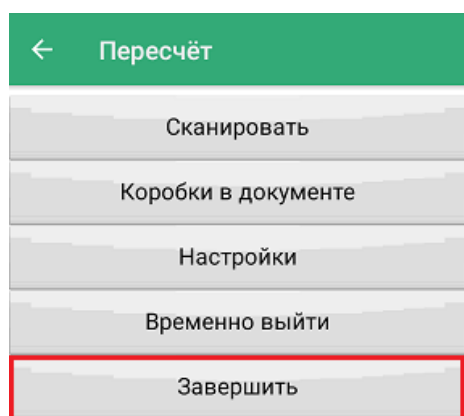

11. Документ с сервера Mobile SMARTS можно загрузить в товароучетную систему для дальнейшей работы. Как это делается в «1С: Предприятие», рассмотрено в статье «[Загрузка результатов выполнения операции «Пересчёт» в «1С: Предприятие»](#)».

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Загрузка результатов выполнения операции «Пересчёт» в «1С: Предприятие»

Последние изменения: 2024-03-26


После выполнения операции «[Пересчёт](#)» (по факту) для дальнейшей работы необходимо загрузить результирующий документ в учетную программу. На данный момент продукт «МДЛП ТСД» интегрирован с «1С: Предприятием», поэтому рассмотрим пример загрузки документа в 1С.

Отправка документа происходит в два этапа:

- с мобильного устройства на [сервер Mobile SMARTS](#);
- с сервера Mobile SMARTS в «1С: Предприятие».


## Отправка документа с мобильного устройства на сервер Mobile SMARTS

После окончания работы с документом необходимо завершить его с помощью одноименной кнопки. Незавершенный документ нельзя отправить на сервер!

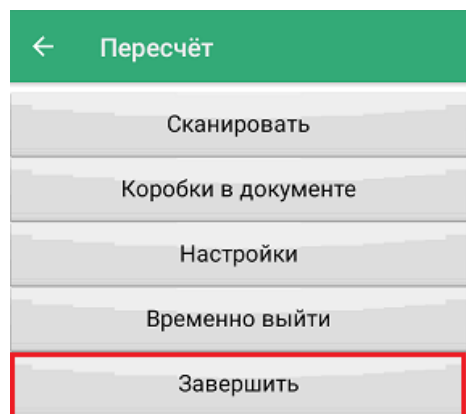

После того как документ был завершен, автоматически произойдет попытка обмена с сервером. В случае ее успешного завершения, на экране появится сообщение «Документ отправлен». Если автоматический обмен не произошел — отправьте документ вручную, нажав на кнопку «Обмен с сервером».




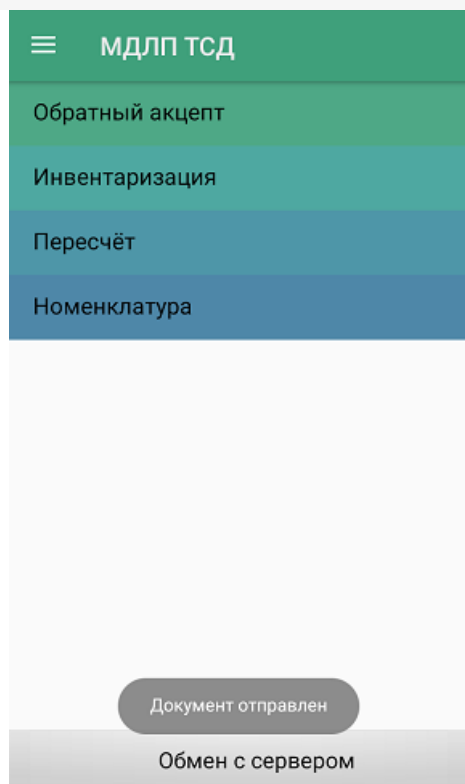


## С сервера Mobile SMARTS в «1С: Предприятие»

Отправка документа с сервера Mobile SMARTS в «1С: Предприятие» производится с помощью специальной обработки 1С от «Клеверенс».


1. Нажмите кнопку «Открыть окно обмена документами».

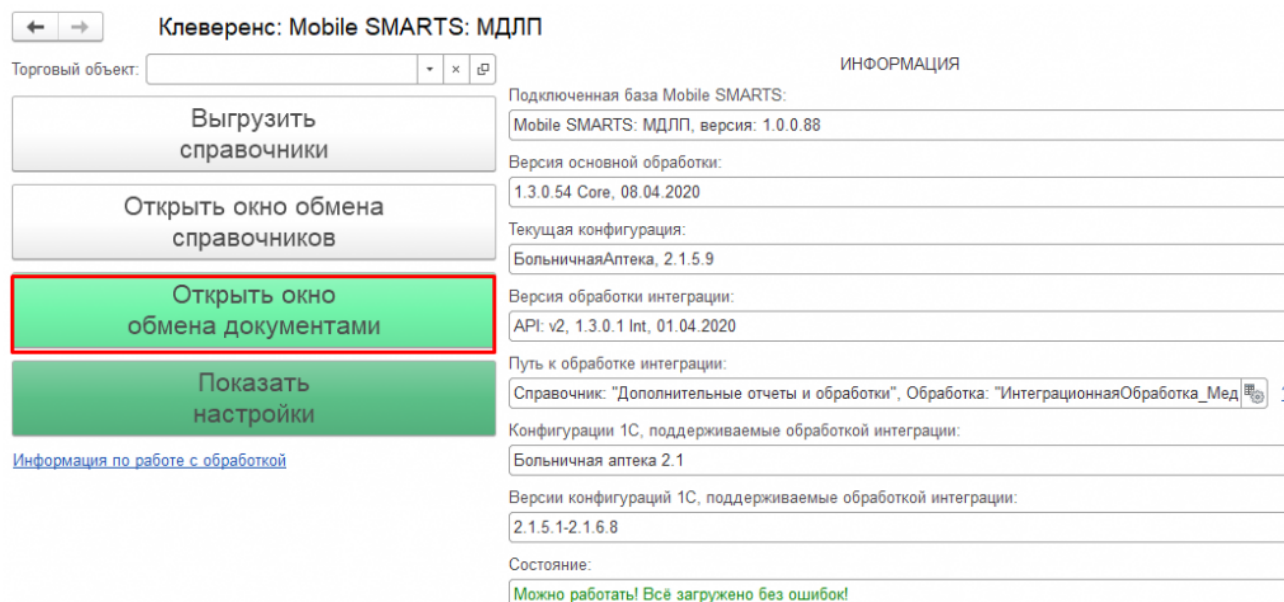


2. Документы, отправленные с мобильного устройства на сервер Mobile SMARTS, находятся в колонке «Документы Mobile SMARTS». Для того чтобы там отобразились последние отправленные с мобильного устройства документы, нажмите кнопку «Обновить».

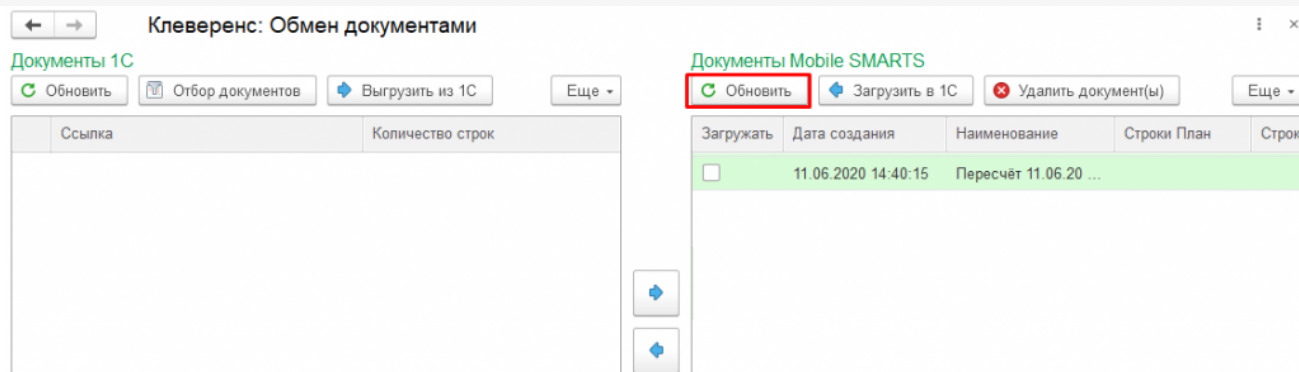

3. Для того чтобы отправить документы с сервера (колонка «Документы Mobile SMARTS») в «1С: Предприятие» (колонка «Документы 1С»), необходимо проставить флаги напротив документов, которые вы хотите отправить, и нажать на кнопку «Загрузить в 1С» (или кнопку со стрелкой).

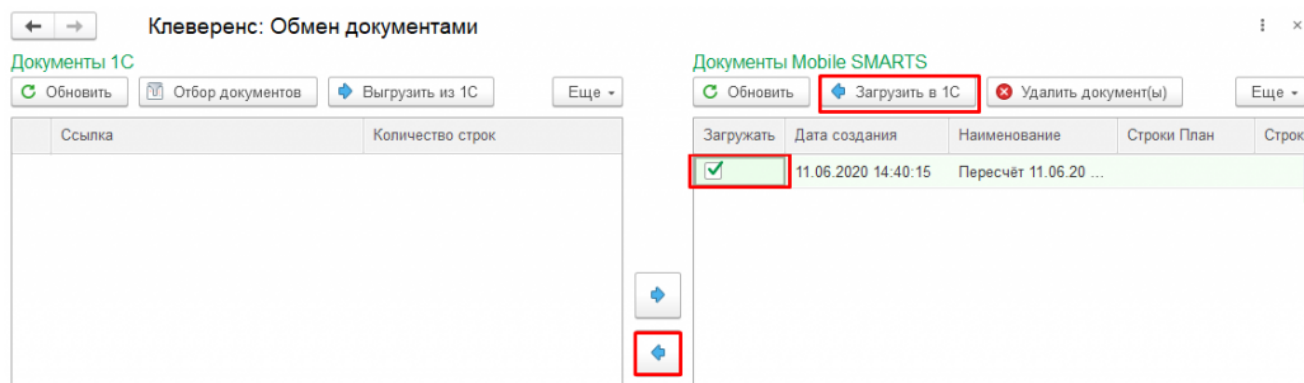

4. Далее выберите, куда вы хотите загружать документ: в новый документ 1С, или в уже существующий (потребуется выбрать из списка). Нажмите кнопку «Загрузить».

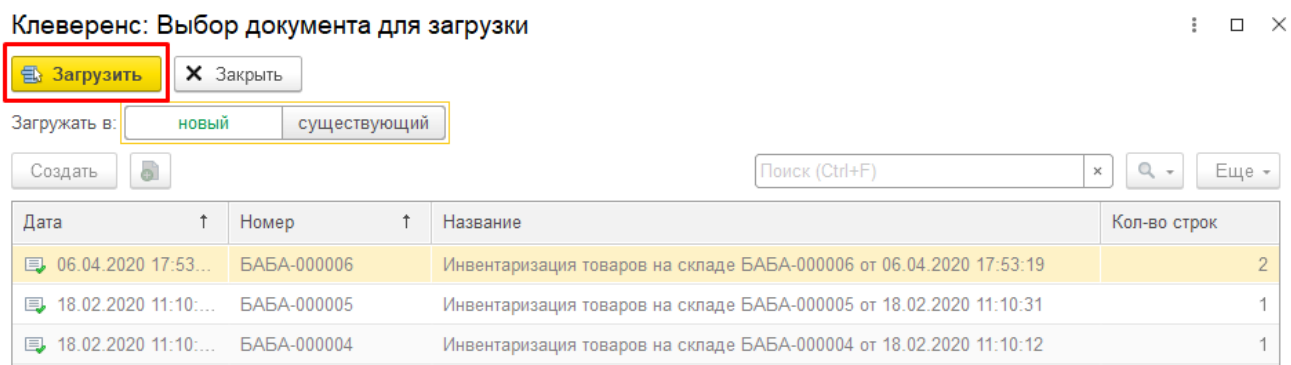

5. Далее в зависимости от выбранного варианта загрузки документа (новый или существующий) будет либо создан новый документ, в котором потребуется указать нужную информацию, либо дозаполнен новыми строками старый. После этого нажмите на кнопку «Провести и закрыть».

←

→

Инвентаризация товаров на складе (создание) \*

Основное

Задачи

Мои заметки

Документооборот

История изменений

Провести и закрыть

Записать

Провести

Печать

Отчеты

Статус: 

В работе

Основное

Товары (3)

Проведение инвентаризации

Номер:

от:

17.06.2020 11:21:49

Организация:

ФАП "Колосово"

Склад:

Склад аптеки

...

Источник финансирования:

...

Ответственный:

eskor

Настройки печати

Печатать цены:

По себестоимости

Вид цены:

Комментарий:

6. На экране появится сообщение о том, что документ успешно проведен.

←

→

☆

Инвентаризация товаров на складе КОБА-000002 от 17.06.2020 11:23:12

Основное

Задачи

Мои заметки

Документооборот

История изменений

Провести и закрыть

Записать

Провести

Печать

Отчеты

Статус: 

В работе

Основное

Товары (3)

Проведение инвентаризации

Номер:

КОБА-000002

от:

17.06.2020 11:23:12

Организация:

ФАП "Колосово"

Склад:

Склад аптеки

...

Источник финансирования:

...

Ответственный:

eskor

Настройки печати

Печатать цены:

По себестоимости

Вид цены:

Комментарий:

Проведен

eskor

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку